

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2020 All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without prior written consent of the copyright holder.



Configuración típica (sala no existente)

Aprobación del cliente

Firma cliente

Firma project manager

Propuesta de implantación

Tabla de contenidos

Plano	Tipo	Descripción
General		
1	C-1	Portada, Tabla de contenidos
2	EA-1	Estado actual
3	A-1	Implantación opción 1
4	A-2	Implantación opción 2
5	AL-1	Requisitos de sala / Leyenda
6	AD-1	Secciones opción 1

Historia de revisión

H
G
F
E
D
C
B
A
0

27-06-2023

MPS

MWR

Concurso

Expediente: 2023/01963

22-06-2023

MPS

KPA

Propuesta

Ver	Fecha	Dib	Comp	Proy. fase	Modificaciones
-----	-------	-----	------	------------	----------------

Notas importantes

Los planos incluyen información de referencia y datos que pueden no estar verificados, por lo que no deben ser utilizados, sin verificaciones adicionales, como documentos constructivos.

Philips no asume responsabilidad ni ofrece garantía acerca del estado o la adecuación de las instalaciones existentes en el lugar en el que el equipo sea instalado.

Contacto de Philips

Sr. J. Alonso González, +34 673 055702, jorge.alonso@philips.com

Identificación de cliente

Nº serie

Philips Healthcare

Philips Cuidado de la Salud, un negocio de Philips Real N.V.

Philips Ibérica S.A., María de Portugal no 1, Madrid, España., 28050
Tel: +34915669288, Fax: +34915669150, Ins. Reg. Merc. Madrid, Tomo 172 del Libro de Sociedades, Folio 119, Hoja 5.416

Management System
ISO 13485
DEKRA

Management System
ISO 9001
DEKRA


Proyecto
Incisive CT 1.1
Hospital de San Eloy
Baracaldo, Spain
SCANER

Plano
Portada
Tabla de contenidos


Dibujo
ES-23-00152
Nº proyecto
Nº pedido

A3 mm
C-1
Plano 1 / 6




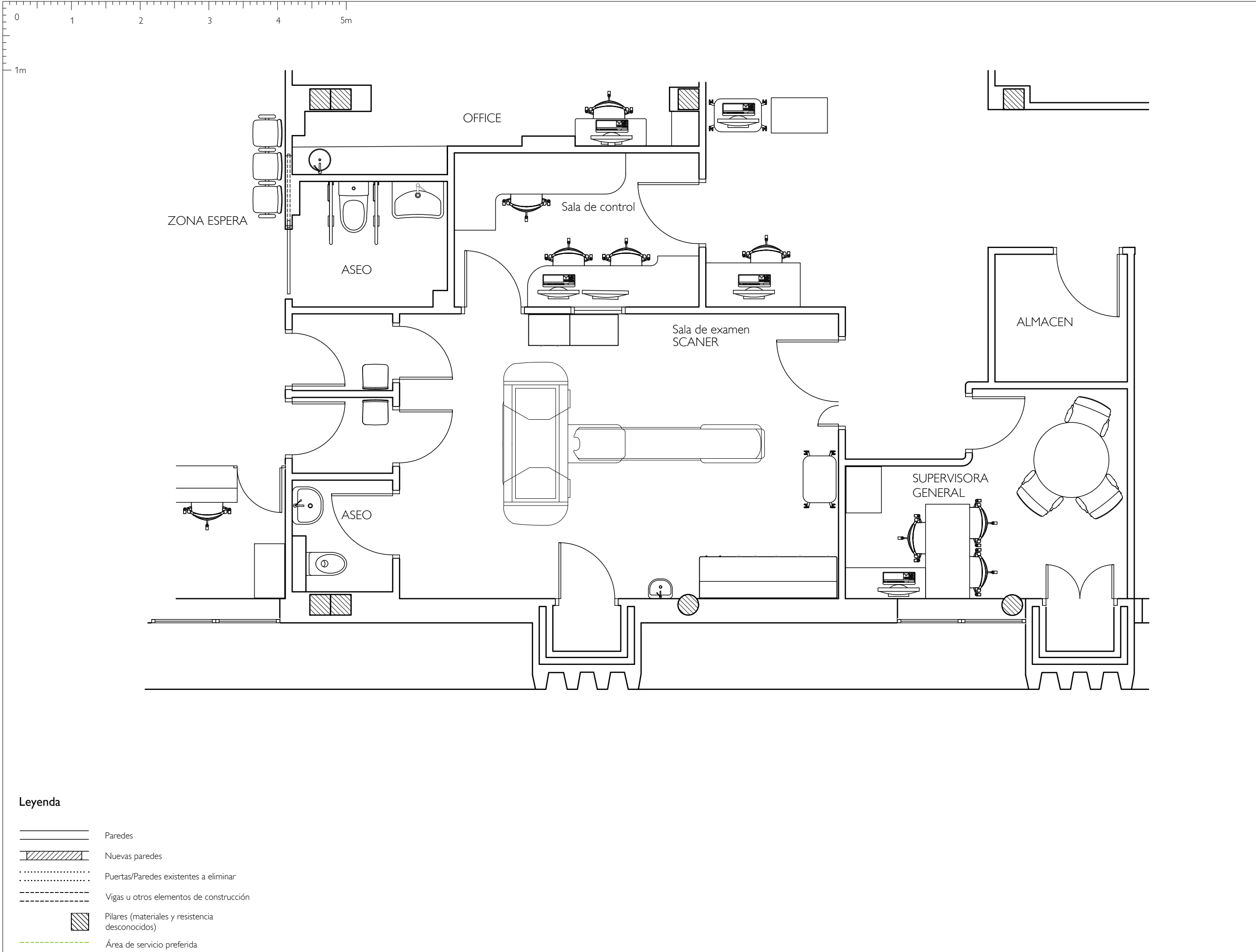

Plano		Estado actual	Proyecto	
A		ES-23-00152	Incisive CT 1.1	
27-06-2023		Hospital de San Eloy		
Nº proyecto		Baracaldo, Spain		
Nº pedido		SCANER		
Nº serie				
A3	1 : 50	mm	AE-1	
Plano		2 / 6		

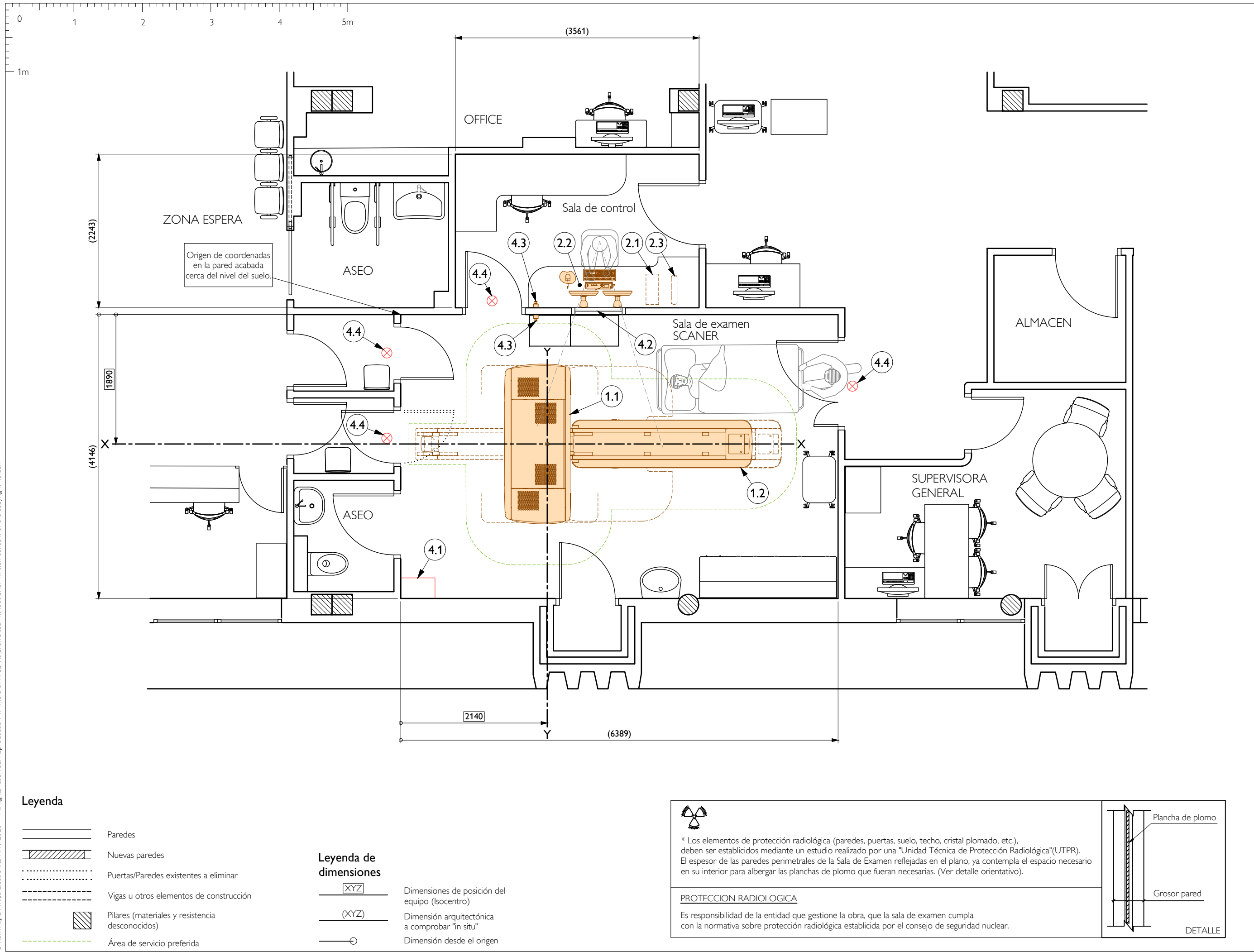

Proyecto		Incisive CT 1.1	
Hospital de San Eloy		Baracaldo, Spain	
Plano		Implantación opción 1	
Dibujo		A	
ES-23-00152		N° proyecto	
27-06-2023		N° pedido	
N° serie		N° serie	
A3		1 : 50 mm	
Plano		A-1	
		3 / 6	

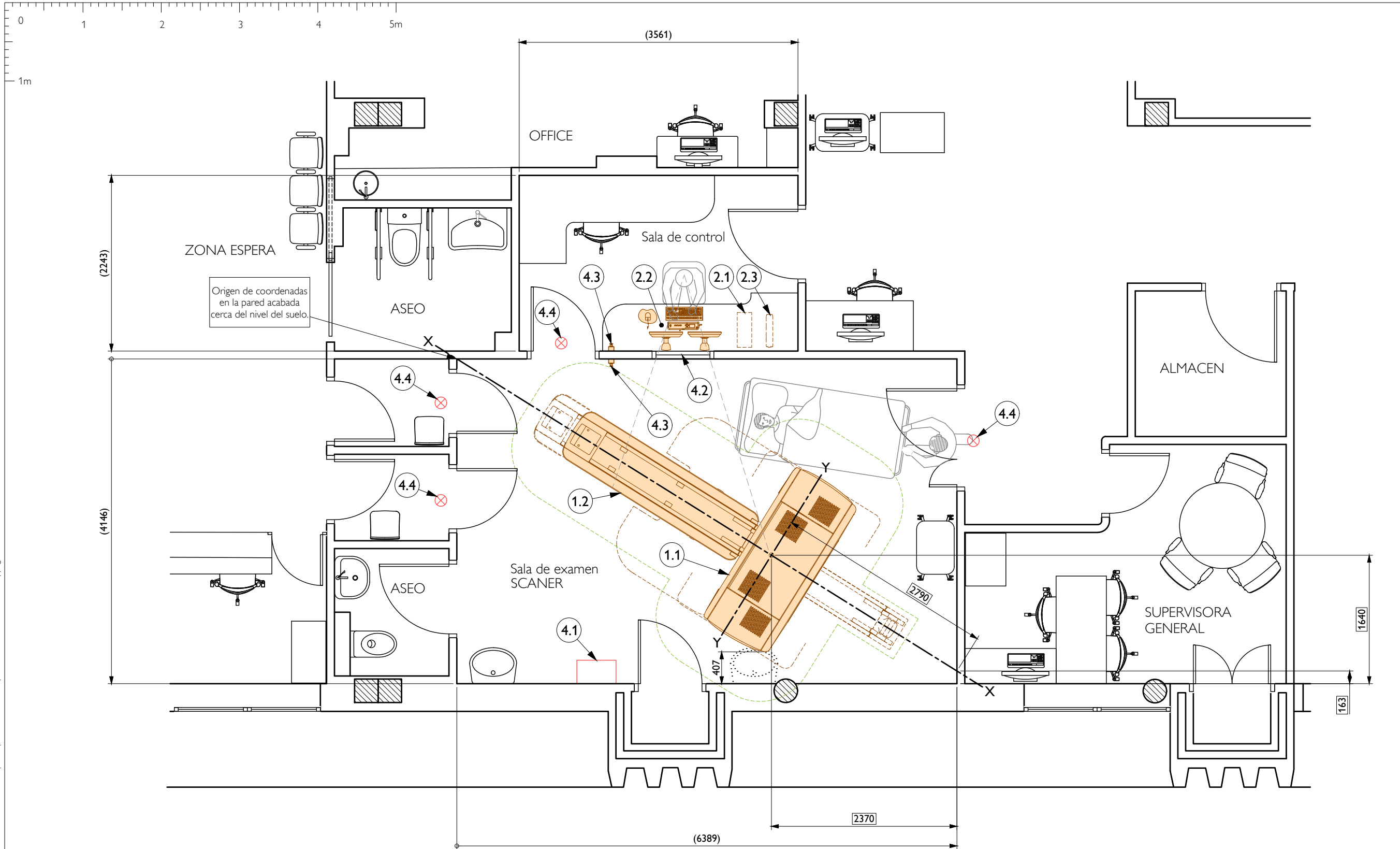

Leyenda

- Paredes
- Nuevas paredes
- Puertas/Paredes existentes a eliminar
- Vigas u otros elementos de construcción
- Pilares (materiales y resistencia desconocidos)
- Área de servicio preferida

Leyenda de dimensiones


- Dimensiones de posición del equipo (Isocentro)
- Dimensión arquitectónica a comprobar "in situ"
- Dimensión desde el origen



* Los elementos de protección radiológica (paredes, puertas, suelo, techo, cristal plomado, etc.), deben ser establecidos mediante un estudio realizado por una "Unidad Técnica de Protección Radiológica"(UTPR). El espesor de las paredes perimetrales de la Sala de Examen reflejadas en el plano, ya contempla el espacio necesario en su interior para albergar las planchas de plomo que fueran necesarias. (Ver detalle orientativo).

PROTECCION RADIOLOGICA


Es responsabilidad de la entidad que gestione la obra, que la sala de examen cumpla con la normativa sobre protección radiológica establecida por el consejo de seguridad nuclear.

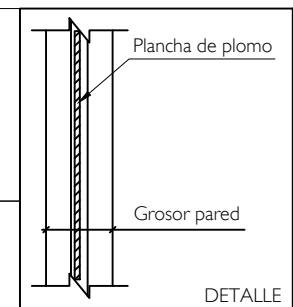


DETALLE

	Requisitos de sala		Incisive CT 1.1				PHILIPS																																																																														
	Red		<table><tr><th>Resp</th><th>Num.</th><th>Descripción</th><th>Peso [kg]</th><th colspan="2">Disip. Acústica [W] [dB(A)]</th></tr><tr><td colspan="6"><i>Sala de examen</i></td></tr><tr><td>A</td><td>1.1</td><td>Scanner Gantry (Incisive CT)</td><td>2036</td><td>5000</td><td>68</td></tr><tr><td>A</td><td>1.2</td><td>Mesa paciente estándar</td><td>360</td><td>≈0</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="6"><i>Sala de control</i></td></tr><tr><td>A</td><td>2.1</td><td>CPU huésped</td><td>8</td><td>425</td><td>55</td></tr><tr><td>A</td><td>2.2</td><td>Consola de control (sin mesa)</td><td>11</td><td>293</td><td>-</td></tr><tr><td>A</td><td>2.3</td><td>Liebert UPS 1000VA (opcionalmente)</td><td>15.8</td><td>110</td><td>46</td></tr><tr><td colspan="6"><i>General</i></td></tr><tr><td>B</td><td>4.1</td><td>Cuadro eléctrico</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>B</td><td>4.2</td><td>Ventana plomada (ver *)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>B</td><td>4.3</td><td>Interruptor de emergencia (SETA)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>B</td><td>4.4</td><td>Luz indicadora Rx</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>					Resp	Num.	Descripción	Peso [kg]	Disip. Acústica [W] [dB(A)]		<i>Sala de examen</i>						A	1.1	Scanner Gantry (Incisive CT)	2036	5000	68	A	1.2	Mesa paciente estándar	360	≈0	-	<i>Sala de control</i>						A	2.1	CPU huésped	8	425	55	A	2.2	Consola de control (sin mesa)	11	293	-	A	2.3	Liebert UPS 1000VA (opcionalmente)	15.8	110	46	<i>General</i>						B	4.1	Cuadro eléctrico	-	-	-	B	4.2	Ventana plomada (ver *)	-	-	-	B	4.3	Interruptor de emergencia (SETA)	-	-	-	B	4.4	Luz indicadora Rx	-	-	-
	Resp	Num.	Descripción	Peso [kg]	Disip. Acústica [W] [dB(A)]																																																																																
	<i>Sala de examen</i>																																																																																				
A	1.1	Scanner Gantry (Incisive CT)	2036	5000	68																																																																																
A	1.2	Mesa paciente estándar	360	≈0	-																																																																																
<i>Sala de control</i>																																																																																					
A	2.1	CPU huésped	8	425	55																																																																																
A	2.2	Consola de control (sin mesa)	11	293	-																																																																																
A	2.3	Liebert UPS 1000VA (opcionalmente)	15.8	110	46																																																																																
<i>General</i>																																																																																					
B	4.1	Cuadro eléctrico	-	-	-																																																																																
B	4.2	Ventana plomada (ver *)	-	-	-																																																																																
B	4.3	Interruptor de emergencia (SETA)	-	-	-																																																																																
B	4.4	Luz indicadora Rx	-	-	-																																																																																
Servicio Remoto		Responsabilidades																																																																																			
Para instalar esta característica es necesario instalar un conector RJ45 Ethernet con acceso a la RED del cliente (10/100/1000Mbps)		A Entregado e instalado por Philips																																																																																			
		B Entregado e instalado por el responsable de la obra																																																																																			
		C Pre-entregado por Philips, instalado por el responsable de la obra																																																																																			
		D Pre-entregado por el cliente e instalado por Philips																																																																																			
		E Existente																																																																																			
Requisitos ambientales																																																																																					
Sala de examen:																																																																																					
Temperatura de funcionamiento es 18°C - 24°C																																																																																					
Humedad relativa (sin condensación) de 40% - 70%																																																																																					
La diferencia de temperatura no debería exceder 5°C por hora.																																																																																					
Sala de control:																																																																																					
Temperatura de funcionamiento es 10°C - 30°C																																																																																					
Humedad relativa (sin condensación) de 40% - 70%																																																																																					
La diferencia de temperatura no debería exceder 5°C por hora.																																																																																					
Notas del proyecto																																																																																					
• Los planos incluyen información de referencia y datos que pueden no estar verificados, por lo que no deben ser utilizados, sin verificaciones adicionales, como documentos constructivos.																																																																																					
• Philips no asume responsabilidad ni ofrece garantía acerca del estado o la adecuación de las instalaciones existentes en el lugar en el que el equipo sea instalado																																																																																					


Dibujo	ES-23-00152 27-06-2023 MPS	A	N° proyecto N° pedido N° serie	A3	mm	Plano	Proyecto	Incisive CT 1.1 Hospital de San Eloy Baracaldo, Spain SCANER
Requisitos de sala		Leyenda						

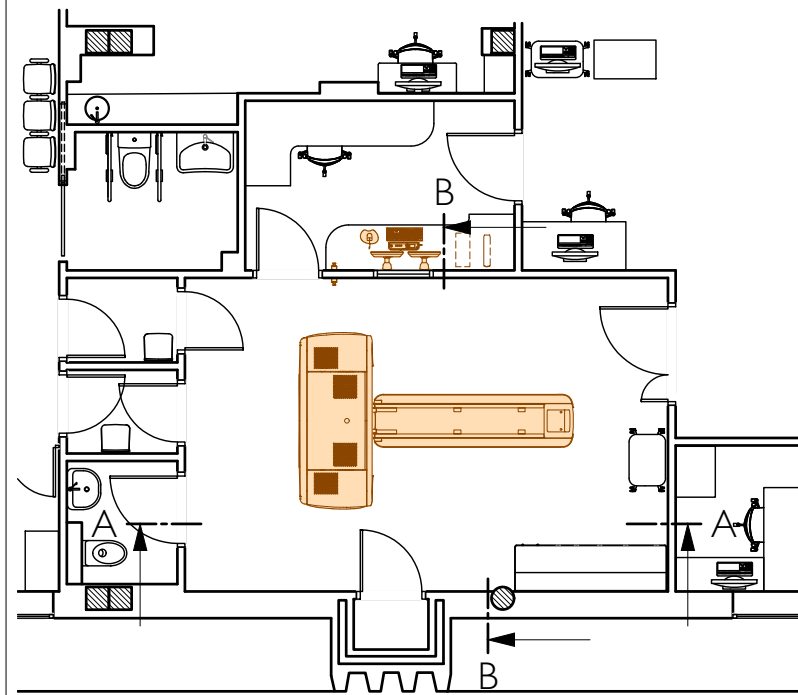

Plano esquemático (escala 1:100)

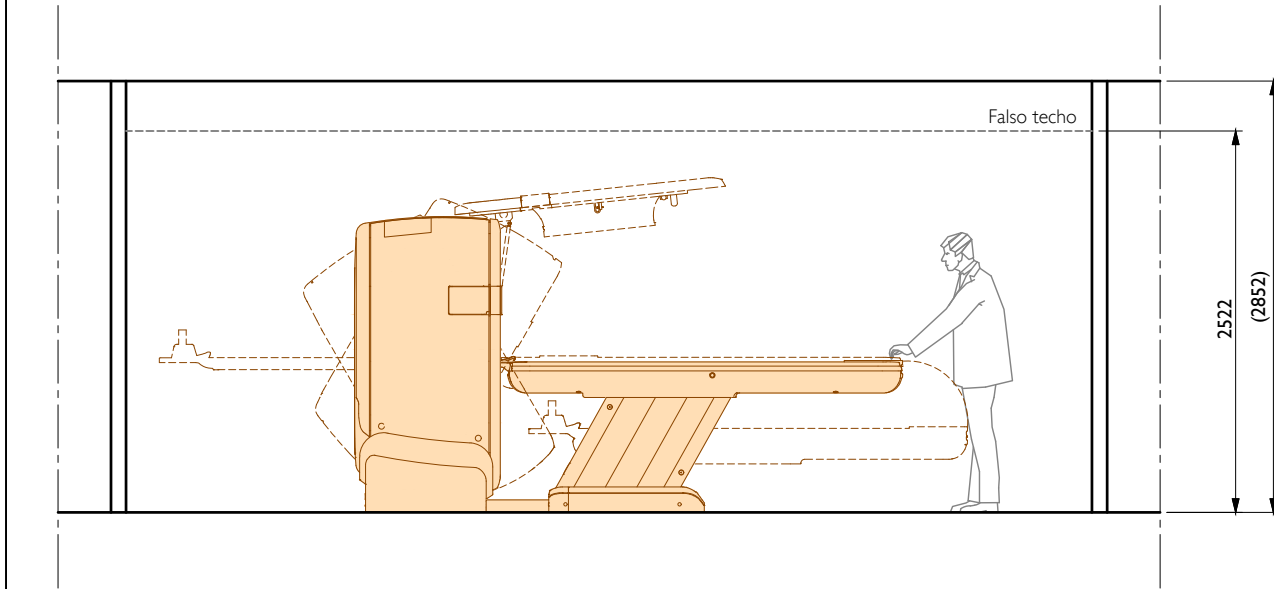

Secciones A-A

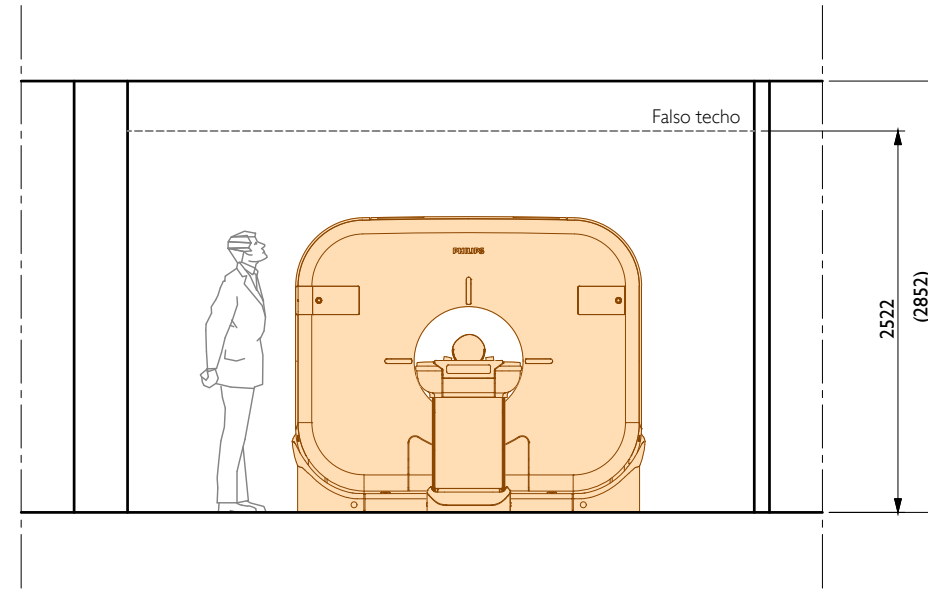

Secciones B-B